

Kii™

Abdominal Access Systems


Kii

バルーンブラントチップシステム



優れた操作性

様々な厚さの腹壁にフィットする独自のソフトジェルコーンとラテックスフリーバルーンが、気腹漏れを防ぎながらスコープや鉗子の操作性を高めます。

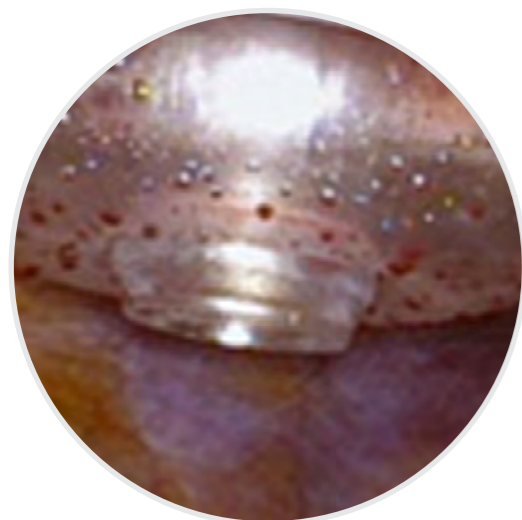

安定した固定力

長時間の手術においても安定した固定力を提供します。

止血効果

切開部が圧迫されることでポート部位の出血を低減します。



Kii バルーンブラントチップシステム



ラテックスフリーバルーン

破断しにくい素材
安定した固定をサポート

ソフトジェルコーン

腹壁にフィットし、気腹を維持しながら
スコープや鉗子の操作性を向上

スーチャータイ

縫合糸による固定にも対応

オプティカルブラントチップ オブチュレーター

トロッカー挿入時にも良好な視野を確保




すり鉢状の挿入口

スコープや鉗子のスムーズな挿入をサポート



迅速な脱気と組織回収

着脱が容易なシールにより
迅速な脱気と組織回収を実現

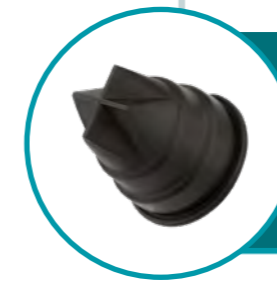

ダブルダックビルシール

スコープのレンズが汚れにくい
独自のシール構造

シンプルなロック機能

ソフトジェルコーンを腹壁の
位置に合わせ簡単に固定

Kii バルーンブラントチップシステム

製品番号	詳細	サイズ	入数
C0Q20	Kii バルーンブラントチップシステム	5mm×100mm	6本/箱
C0R47	Kii バルーンブラントチップシステム	12mm×100mm	6本/箱
C0R50	Kii バルーンブラントチップシステム	12mm×130mm	6本/箱

販売名: Kii・バルーントロッカー
医療機器製造販売認証番号: 305ACBZX00018000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

NOTES

© 2024 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical、Appliedメディカルのロゴ、[®]または[™]のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE 6階

www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国

www.appliedmedical.com